


この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。

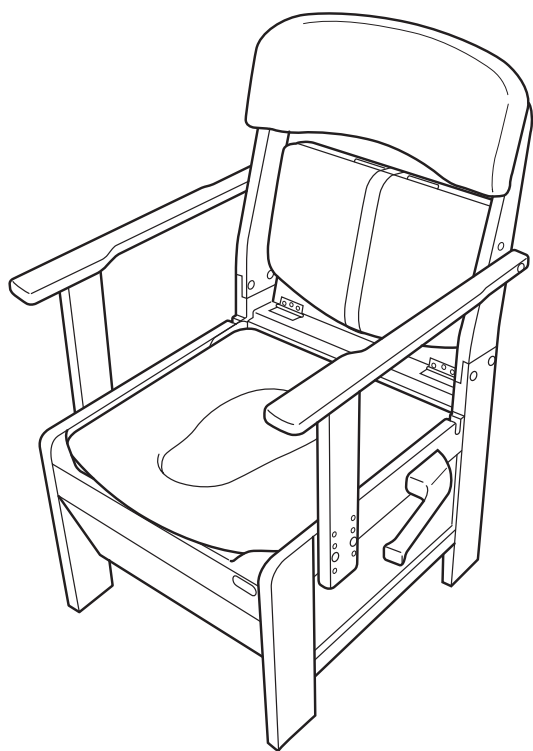

### 目次


各部の名称と製品仕様	1P
ご使用前の注意	1～2P
ご使用上の注意	2P
組み立て方	3～5P
こんな調節ができます	5P
こんな使い方ができます	5P
ご使用方法	6P
お手入れ方法	6P
修理サービスについて	6P

福祉用具総合メーカー

 **株式会社 幸和製作所**

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1


【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)

 **0120-508-058**

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.kowa-ws.co.jp>

## 各部の名称と製品仕様

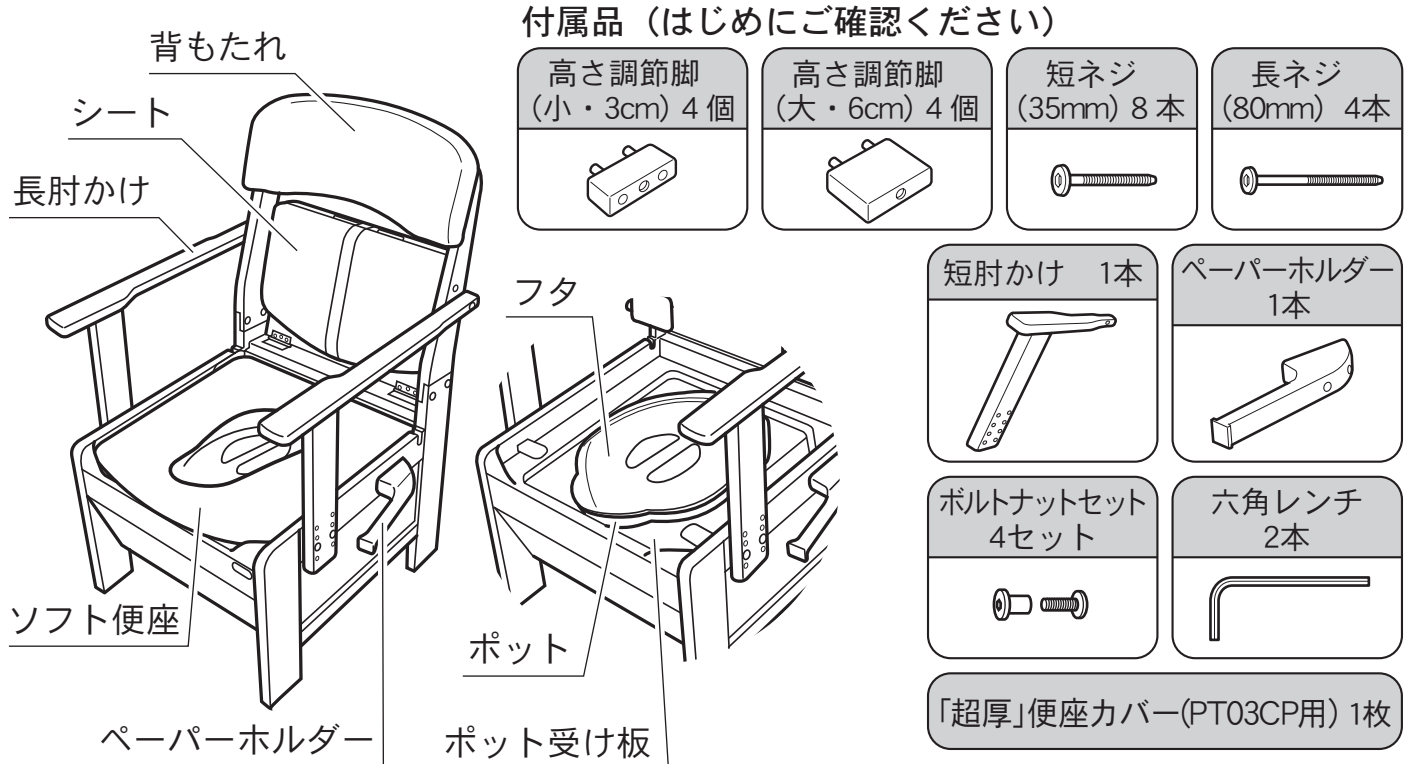

組み立て寸法	幅520×奥行560	座 幅	390 mm
	×高さ830～920 mm	便 座 高 さ	340・370・400・430 mm
肘 かけ 高 さ	180・200・220・240 mm	重 量	約13.5 kg
ポットの容量	9リットル	最大使用者体重	100 kg
材 質	本体：天然木（ラバーウッド） 背もたれ・シート・ソフト便座：塩化ビニル樹脂（表）、ウレタンフォーム（内部） ポット・ポットフタ：ポリプロピレン（耐熱温度120℃）		

## ご使用前の注意

転倒や事故防止のため、下記の事項を必ず守ってください。

**⚠ 警告** 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 安定の悪い場所に設置しないでください。転倒するおそれがあります。
- 各部を点検し、キズや変形、亀裂や破損などの異常がないこと、確実に設置できていること、ぐらつきがないことを確認してください。

**⚠ 注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 組み立てるときは周囲に人がいないことを確認してください。
- 組み立て、および調節は確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 各部のネジが確実に締められていること、また破損や脱落がないことを確認してください。

**⚠ 注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 火気の近くに設置しないでください。変形や故障の原因になります。
- 屋外では使用しないでください。本体やシートなどが劣化したり、変色したりすることがあります。
- 各部の調節は確実に行ってください。また指などをはさまないように注意してください。
- 本体を移動する場合は、引きずらないようにご注意ください。畳や床などを傷つけることがあります。

## ご使用上の注意

**⚠ 警告** 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 使用者の身体状況の変化によっては、ご購入販売店やケアマネージャーなどの専門家に相談したり、介助者が付き添ってください。
- 座る際や、使用後立ち上がるときに、使用者自身が身体の安全性を十分に確保できない場合は、ポータブルトイレを固定するなど（例：ベッドにひもで固定するなど）して使用するか、介助者が付き添ってください。
- 背もたれにつかまって立ち座りをしないでください。転倒するおそれがあります。
- ペーパーホルダーに手をついたり、体重をかけないようにしてください。転倒するおそれがあります。
- 改造したり、踏み台にするなどポータブルトイレ以外の用途に使用しないでください。破損や故障の原因になります。
- 最大使用者体重を必ず守ってください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外行わないでください。

**⚠ 注意** 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目を必ず守ってください。

- 高さ調節など各部の調節についてはご購入販売店かケアマネージャーなどの専門家に相談されることをおすすめします。
- シートを開閉するときは取っ手や前端を、ソフト便座を開閉するときは前端を持ってください。側面を持つと肘かけや本体に指をはさみ、ケガをすることがあります。
- ソフト便座を取り付けるとき、また開閉するときにソフト便座の軸をさわらないでください。指をはさんでケガをすることがあります。
- 汚物処理などでポットを取り出すときは、ソフト便座が倒れてこないことを確認してから取り出してください。ソフト便座が倒れてくると指をはさんでケガをするおそれがあります。
- 本体を移動する場合はポット内は必ずカラであることを確認してください。中身がこぼれ、畳や床などを汚すおそれがあります。
- ポットの中にタバコの火を落とさないでください。
- 直接水をかけて洗わないでください。水がかかると故障や事故の原因になります。
- 便座をご使用になる場合は便座カバーをご使用ください。衣服などがこすれた際、色移りするおそれがあります。

# 組み立て方

あらかじめ、箱から背もたれ、本体、付属品を取り出してください。また本体に取り付けられているソフト便座、ポットを取りはずしてください。最後にポット受け板を手前に引きながら取り出し、以下の手順に従って組み立ててください。


## 1 本体を取り出す

図のような状態にしてください。





## 2 背もたれを取り付ける

背もたれを図のように取り付けます。

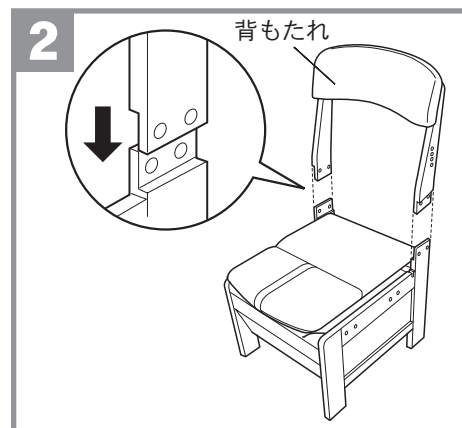

## 3 ネジで固定する

左右の背もたれの柱を、図のように4ヶ所をボルトナットセットではさみこんでしっかりと固定します。

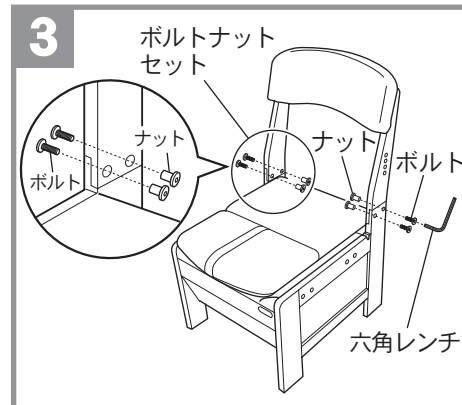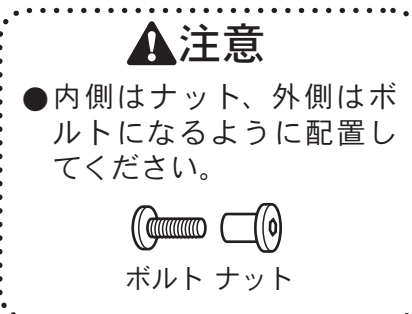


## 4 便座の高さを調節する

便座の高さは使用される方に合わせて、4段階に変えられます。便座の高さを調節する場合は本体を横に倒し、脚の先に付属の高さ調節脚を長ネジ(80mm)でしっかり取り付けます。(高さ調節脚は組み合わせによって3cm分、6cm分、9cm分高くすることができます。)

高さ調節脚	便座高
なし	34cm
3 cm (小)	37cm
6 cm (大)	40cm
9 cm (小 + 大)	43cm

## 4 (例) 9 cm 分高くする場合

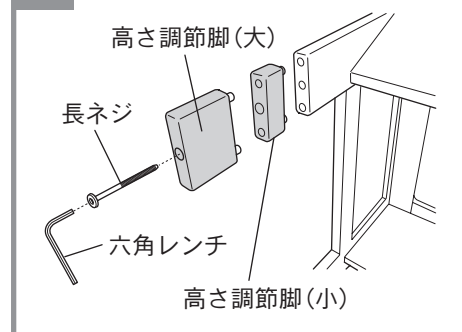



## 5 肘かけの高さを調節する

### ■取り付ける位置を決める

使用される方の症状、体格により、4段階の高さから選んでください。また長肘かけが使いにくい場合には、付属の短肘かけを取り付けてください。

### ■取り付ける

本体側面にある取り付け穴に、図のように短ネジ(35mm)でしっかり取り付けます。

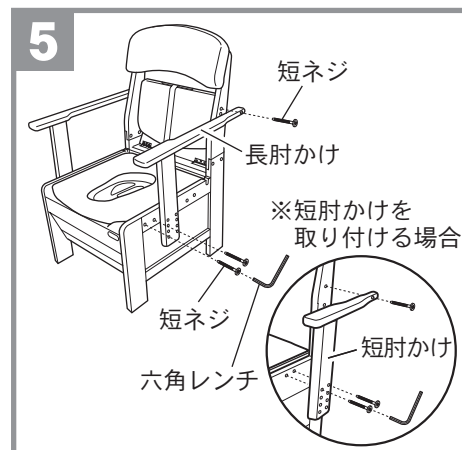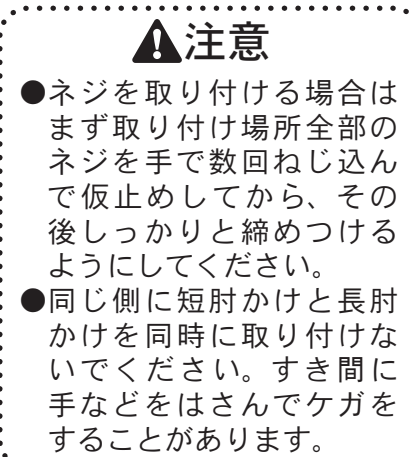




## 9 ペーパーホルダーを取り付ける

図のように空いている短肘かけのネジ穴に短ネジ（35mm）を使ってペーパーホルダーを取り付けます。左右どちらにも取り付けできます。

### ！注意

- ペーパーホルダーに手をつくなど無理な力を加えないでください。
- 短肘かけ取り付け部以外の場所には取り付けないでください。

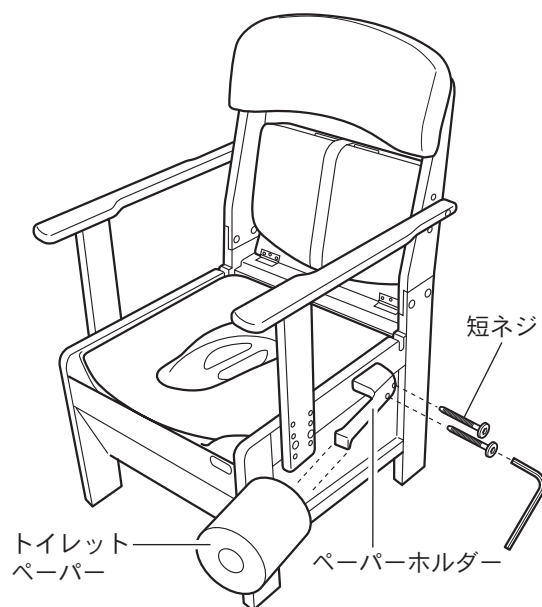


## こんな調節ができます

※調節をするときは、ケアマネージャーやご購入販売店など専門家にご相談されることをおすすめします。


### 【肘かけの高さを変えて使う】

身体の片方が不自由な方は、左右の肘かけの高さを変えて使用できます。

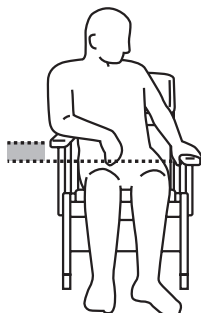

### 【身体をご自身で支えられない方は】

座面を低くして、肘かけを高く取り付けると、身体が安定した状態で座れます。

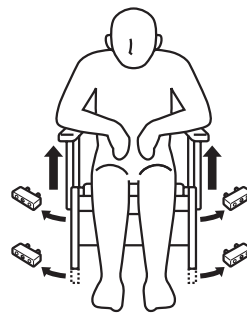


## こんな使い方ができます

※ポータブルトイレを置く場所や向きは、使用される方の症状などを考慮してお決めください。


### 【片方の肘かけだけで使う】

立ち上がれないけれども、座位横移動できる方のために、肘かけを片側だけ取りはずして使用できます。

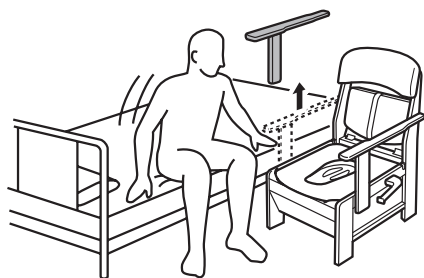


### 【肘かけを取り付けずに使う】

介助なさる方が身体を支えて補助されるような場合は、肘かけを取り付けずに使用できます。

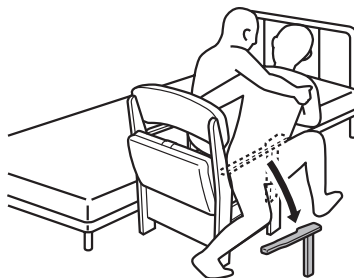

### 【短肘かけを使う】

座位横移動や体位変換の補助として、付属の短肘かけを取り付けて使用できます。

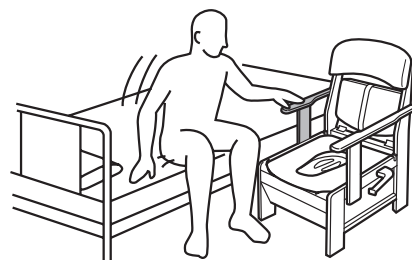

## ご使用方法

- 使用するときは、ポットのフタをはずしてください。
- 汚物を処理するときにはポットにフタをして運び、トイレに流してください。
- 汚物の処理はできるだけ早めに行ってください。

### ⚠注意

- ポットを取り出すときは、便座カバーにポットのフタが引っかからないようにしてください。引っかかると内容物がこぼれることがあります。

## お手入れ方法

### ポータブルトイレのお手入れ

- 本体、便座が汚れたときは、乾いた布で拭いてください。ひどい汚れは、柔らかい布やスポンジにうすめた中性洗剤を含ませて拭きとってください。その後、水につけた布を固くしぼって洗剤を拭きとってください。
- タワシや研磨剤入りのスポンジ、磨き粉などは使用しないでください。
- トイレ用洗剤や漂白剤、ベンジン、シンナー、クレゾールなどは絶対に使用しないでください。本体、ソフト便座を傷めたり、故障や事故の原因になります。



### 便座カバーのお手入れ

- 便座カバーを洗濯する場合は、必ずパイプ取出口からパイプを抜いて洗濯してください。



洗濯には必ず40℃以下の水を使用し、弱水流で洗ってください。



塩素系漂白剤は使用しないでください。



ドライクリーニングはしないでください。

## 修理サービスについて

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。

### 保証書について

- かならず「販売店名、お買い上げ日」などが記入してあることをお確かめになり、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。
- 保証期間経過後、修理を依頼されるときはご購入販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

## テイコブ家具調ポータブルトイレ PT03CP（本体）保証書

本書は、本記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から下記期間中故障が生じた場合は、本書をご提示の上、ご購入販売店にお問い合わせください。

### 保証規定

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
  - 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷
    - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
    - 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害による故障および損傷
  - 一般家庭以外で、業務用（施設使用）などにご使用され故障した場合
  - 本書のご提示がない場合
  - 本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - 排泄物や、お手入れの際に水分がかかったことによる木部の腐敗
  - 排泄物や、お手入れの際に水分がかかったことによるおいの染み込み
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
    - この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
    - 保証期間経過後の修理については「修理サービスについて」をご覧ください。
  - 次の項目は無料修理から除外されます。
    - 便座カバー、ポット、フタ
    - 間違った使い方や、手入れ不良によるもの
    - 使用者の造作変更によるもの
    - 災害、事故によるもの
    - 実費修理に要する運賃などの諸経費
  - 日常的に使用した商品のお取替えはご遠慮ください。

商品名	テイコブ家具調ポータブルトイレ PT03CP（本体）	保証期間 お買い上げ日より1年間
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所 〒	
	電 話	
販売店	店名 住 所 電 話	

※本製品を他の方にお譲りになるときは、必ず本書も合わせてお渡しください。

臭いが気になる方は、別売にて

- ポータブルトイレ用消臭錠（30錠入り）
- ポータブルトイレ用消臭スプレー（300ml入り）
- ポータブルトイレ用消臭液 Mサイズ（400ml入り）
- ポータブルトイレ用消臭液 Lサイズ（1000ml入り）

がございます。

排泄臭の除去に最適！

#### ポータブルトイレ用消臭錠

- ポータブルトイレの気になる臭いをおさえます。
- 1錠ずつで効果が長時間持続します。

TAKE CARE OF  
**Tacaof**  
<http://www.kowa-ws.co.jp>